

WAGOSUSZARKI AGS



- promienniki halogenowe lub podczerwone (AGS/IR)
- wysoka dokładność pomiaru
- wygodne menu tekstowe
- temperatura suszenia do 160°C lub do 250°C
- wyświetlanie szkicu wykresu suszenia
- pamięć 10 programów suszenia
- czasowy i automatyczny tryb suszenia
- RS232C i USB do drukarki lub komputera

Wagosuszarki serii AGS są przeznaczone do szybkiego i dokładnego mierzenia wilgotności materiałów.



promienniki
halogenowe lub
podczerwone



kalibracja zewn.



zgodność z GLP



wewnętrzny zegar



konfiguracja
wydruków



pamięć programów
suszenia



procenty



wybór języka menu



inne jednostki



szkic wykresu suszenia



profile suszenia



raporty suszenia



bezpłatne programy komputerowe

Opcje na zamówienie:

promiennik podczerwieni


zewnętrzny termometr kalibracyjny

szalki jednorazowe (10 szt.)



filtry (sączi) papierowe (100szt.)

filtry z włókien szklanych (100 szt.)

software: Promas **gratis** - wykresy, rejestracja wyników

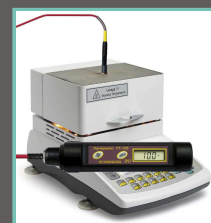

zewnętrzny termometr kalibracyjny

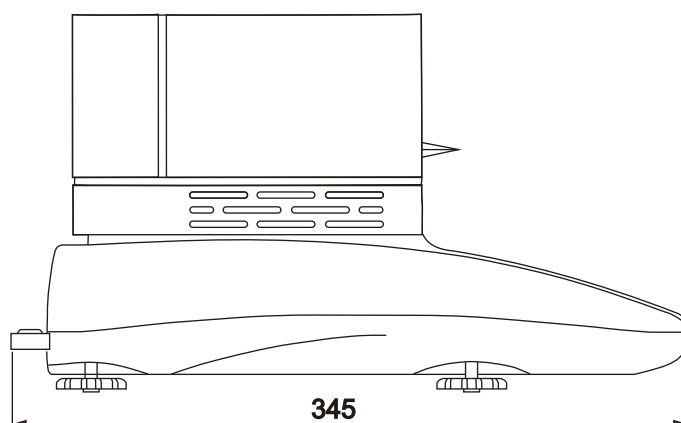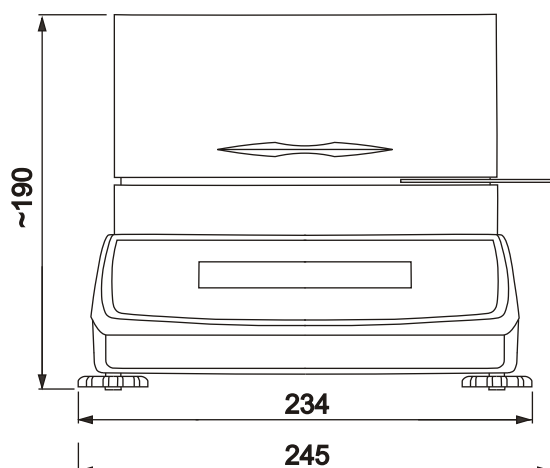

Dane techniczne

Typ wagosuszarki	AGS50D	AGS60	AGS120	AGS210	AGS60 /T250	AGS120 /T250	AGS210 /T250	AGS60 IR	AGS120 IR	AGS210 IR
Zakres wagi (Max)	50g	60g	120g	210g	60g	120g	210g	60g	120g	210g
Działka odczytowa wagi (d)	0,1mg	1mg	1mg	1mg	1mg	1mg	1mg	1mg	1mg	1mg
Zalecana masa próbki	2÷10g									
Temperatura pracy	+10 ÷ +40°C									
Dokładność odczytu wilgotności	1% (sample 0,01÷0,5g) 0,1% (sample 0,5÷5g) 0,01% (sample >5g)									
Powtarzalność pomiaru wilgotności	±0,05% (sample 2g) ±0,02% (sample 5g)	±0,1% (sample 2g) ±0,04% (sample 5g)								
Pamięć ustawień	10 programów suszenia (dla 10 różnych materiałów)									
Maksymalna temperatura suszenia	160°C				250°C				160°C	
Czas próbkowania	1 ÷ 180s									
Maksymalny czas suszenia	10h									
Tryby zakończenia suszenia	czasowy, skrócony (automatyczny), ręczny									
Promienniki halogenowe	2 x 118mm 200W							2 x 118mm 200W		
Długość fali / temperaura barwowa	1,070µm / 2700°K							2,150µm / 1350°K		
Czas nagrzewania komory suszenia do 100°C	ok. 3 min.									
Wymiar szalki	φ90mm									
Wymiary komory suszenia	φ108 x 20mm									
Złącza	RS232C (do komputera lub drukarki), USB (do komputera), PS2 (do klawiatury komputerowej)									
Zasilanie (moc maksymalna)	~230V 50/60Hz 160VA				~230V 50/60Hz 300VA				~230V 50/60Hz 400VA	
Gabaryty	215(235) x 345 x 200mm									
Masa własna	7kg									
Zalecany wzorzec masy (wg OIML)	E2 50g	F2 50g	F2 100g	F2 200g	F2 50g	F2 100g	F2 200g	F2 50g	F2 100g	F2 200g